

# 人工授精用 カテーテル



経子宮頸管的に精子を子宮腔内に注入する人工授精用カテーテルです。  
従来のノーマルタイプに加え、  
多くの要望にお応えしカテーテル部を約2cm伸長した  
ロングタイプもラインナップしました。

●すべてEOG滅菌済です。

カタログ番号	製品形状		カテーテル全長	ストレート部分	先端外径	包装形態
NM-AIH10L	ロングタイプ	スタイレット無し	95.0mm	62.0mm	1.6mm	100本/箱
NM-AIH10L-ST		スタイレット付き				
NM-AIH02L	ロングタイプ	スタイレット無し	76.8mm	38.8mm	2.2mm	20本/箱
NM-AIH02L-ST		スタイレット付き				
NM-AIH10	ノーマルタイプ	スタイレット無し	76.8mm	38.8mm	2.2mm	100本/箱
NM-AIH10-ST		スタイレット付き				
NM-AIH02	ノーマルタイプ	スタイレット無し	76.8mm	38.8mm	2.2mm	20本/箱
NM-AIH02-ST		スタイレット付き				

# 人工授精用カテーテル

**特長**

## ■ ロングタイプを新たにラインアップ。

多くの先生方からの強いご要望にお応えし、ロングタイプをラインアップ。  
カテーテル部は約2cm長く、外径はより細くなりました。

## ■ すぐれた操作性

弾力性とコシの強さを兼ね備えたスチレン系エラストマー材質の採用で操作性に優れ、キック(中折れ)も発生しにくくなっています。

## ■ 先端開孔型カテーテル

従来の側孔型カテーテルに比べ、遠心管最底部まで無駄のない採液が可能です。

## ■ スタイレット付きをご用意

形状付けに優れたスタイレット付きもご用意。様々な症例への対応が可能になりました。スタイレットをカテーテルに留置したままでの注入が可能です。


**スタイル**

**全体**


### ● スタイレット無しタイプ



### ● スタイレット付きタイプ

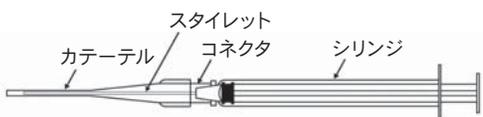

**カテーテル部**

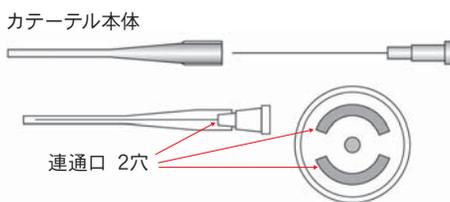

この連通口によりスタイレットを留置したままでの注入が可能です。

## 人工授精スターターキット

カタログ番号 ● AIHSTK01

人工授精に必要なグッドスパーム単層法キットや採精用コンテナ等の消耗品と人工授精用カテーテルがセットになったこれから人工授精を始める場合に最適なパッケージです。

● 詳しいキット内容は専用カタログをご参考ください。



※本製品は薬事法の定めるところの医療機器、体外診断薬ではありません。ヒトまたは動物の治療に用いるものではありません。※記載の仕様等は、予告なく変更される場合があります。写真と実際の製品とは若干異なる場合があります。

販売代理店

販売元



**株式会社ナカメディカル**

〒190-0012 東京都立川市曙町1-18-2 一清ビル別館  
Tel.(042)529-9313 Fax.(042)529-9517

<http://www.nakamedical.co.jp>

製造元



(1408003000)