

マイクロドロップ 培養用ディッシュ



- ミネラルオイルを使用して(全面約2.5mlでカバー可能)マイクロドロップによる胚の培養に適しています。
※22ウェルディッシュは2mlで片面カバー可能です。
- ウェル内で媒精または胚培養を行うため、ドロップ間での接触がなくコンタミネーションの心配がありません。
- すべてのウェル底面が同位置にあるので顕微鏡観察が容易にできます。
また、底面がホットプレートに接する構造のため、一定の温度に保つことができます。


カタログ番号	品名	規格	備考
NM-MCD-12	マイクロドロップ培養用12ウェルディッシュ	120枚(個装)	電子線滅菌品
NM-MCD-16	マイクロドロップ培養用16ウェルディッシュ	100枚(個装)	
NM-MCD-22	マイクロドロップ培養用22ウェルディッシュ	100枚(個装)	
NM-MCD-25	マイクロドロップ培養用25ウェルディッシュ	120枚(個装)	

マイクロドロップ培養用ディッシュ

ウェル形状


NM-MCD-12

ミネラルオイル約2.5mlで全面カバー可

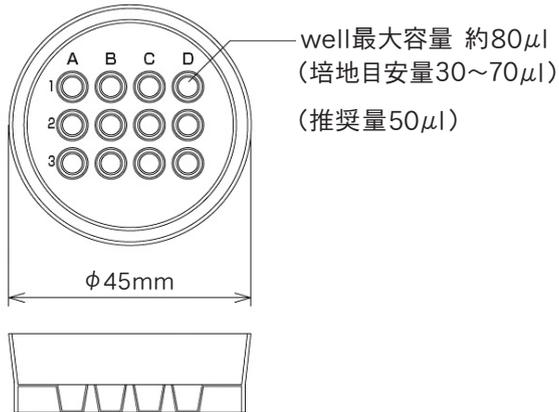


NM-MCD-16

ミネラルオイル約2.5mlで全面カバー可

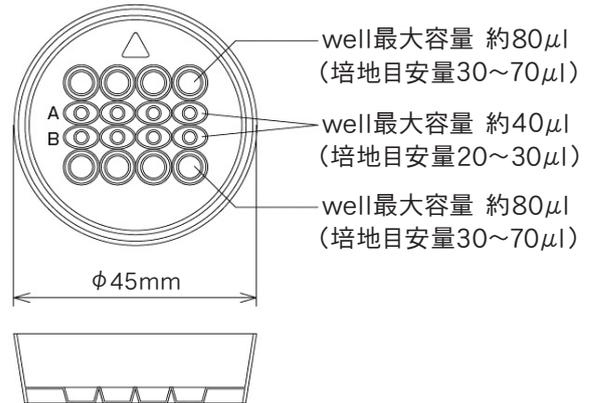


NM-MCD-22

ミネラルオイル約2.0mlで片面カバー可

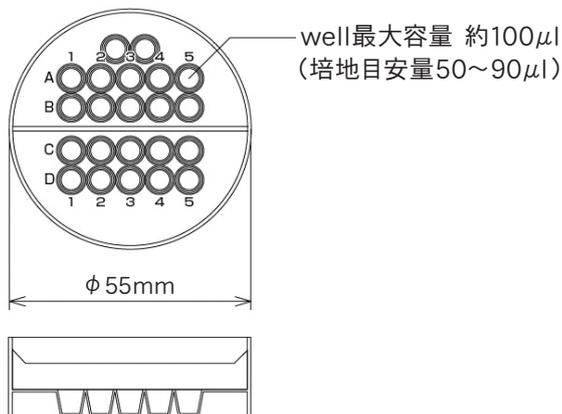

NM-MCD-25

ミネラルオイル約2.5mlで全面カバー可

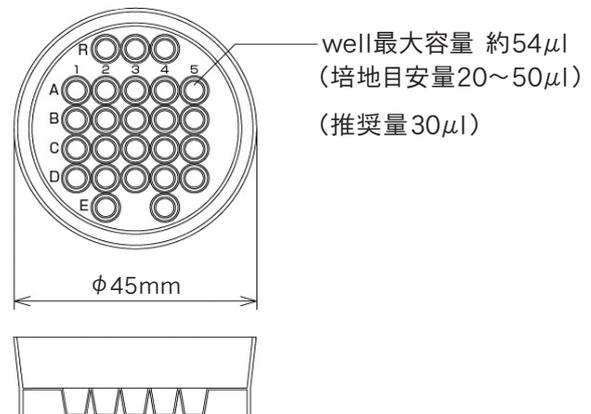

※商品のデザイン、仕様、名称、型番等は予告なく変更する場合があります。

販売代理店

販売元



NAKAMEDICAL INC.

株式会社ナカメディカル

〒190-0012 東京都立川市曙町1-18-2 一清ビル別館
Tel.(042)529-9313 Fax.(042)529-9517

<http://www.nakamedical.co.jp>

製造元

